



CENTRO MESSÈGUÈ

 **pharma**  
SHAPE



IL MULTISISTEMA 3 IN 1

---

Per rimodellare il corpo  
e rivitalizzare la pelle del viso.


# Comodo, efficace, non invasivo.

La nuova generazione di trattamenti per il **rimodellamento dei contorni del corpo** e il **ricompattamento della cute del viso**. Dai piccoli miglioramenti nelle aree problematiche, alle maggiori trasformazioni sull'intero corpo, possiamo aiutarti ad apparire al meglio.

pharma**SHAPE** combina tre  
diverse tecnologie che comprendono:



la Radiofrequenza  
multipolare

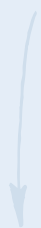


il Laser  
LLLT



l'aspirazione Vacuum  
con vari impulsi dinamici.


La combinazione di **Radiofrequenza multipolare** e **Laser LLLT** crea un intenso calore termico nei tessuti connettivi, compreso il setto fibroso.

Questo, favorisce un aumento dei depositi di collagene e del metabolismo cellulare, determinando una considerevole riduzione localizzata del volume e della lassità cutanea. La funzione concomitante dell'aspirazione **vacuum** genera un immediato aumento della circolazione sanguigna e del drenaggio linfatico, entrambi essenziali per il miglioramento della salute generale.

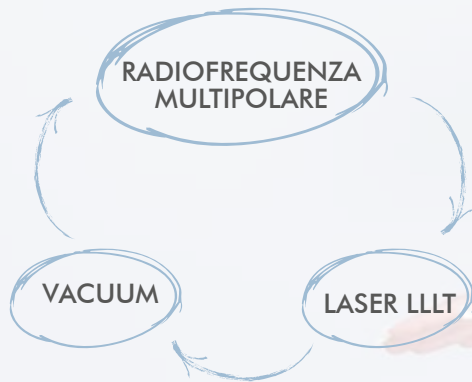

# Come funziona PharmaShape?

1

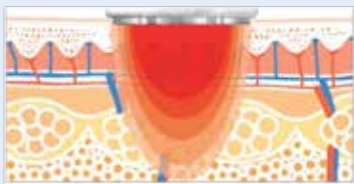

## RF (RADIOFREQUENZA)

- **pharmaSHAPE** genera un **segnale Radiofrequenza bipolare, quadripolare, esapolare**.
- Dal contatto dell'energia RF (radiofrequenza) con l'impedenza tissutale, viene a generarsi il **calore**.
- Il derma, ricco di collagene, riscaldato nel modo giusto, si denatura immediatamente e le fibrille si contraggono e ispessiscono.
- Le fibre di collagene, presenti nel derma, riscaldate nel modo giusto si denaturano e conseguentemente si contraggono e si ispessiscono.

2



## ASPIRAZIONE VACUUM

- **pharmaSHAPE** vanta una **tecnologia vacuum-assistita**, associata a vari impulsi dinamici.
- Il Vacuum solleva, piega e comprime la cute per aumentare la circolazione sanguigna locale, e stimola il drenaggio linfatico.
- Facilita l'attività dei **fibroblasti**, e favorisce la **vasodilatazione** oltre a diffondere l'ossigeno. Permette una precisa distribuzione dell'energia.

3



## LASER LLLT

- Man mano che il Laser LLLT irradia il tessuto adiposo, aiuta a formare **micropori** transitori negli adipociti, ed accelerando la **frammentazione dei trigliceridi** in glicerolo e acidi grassi, che possono fuoriuscire dalla cellula, che risulterà così ridotta di volume. I lipidi fuoriusciti, a loro volta, vengono eliminati attraverso le normali vie metaboliche.
- Risulta efficace, nella **riduzione della misura della circonferenza** di tutto il corpo, nelle zone trattate specificamente, ed ha dimostrato la riduzione di edemi.

# Struttura principale

## PANNELLO DI CONTROLLO:

L'intuitiva interfaccia con touch screen LCD con impostazioni predefinite da computer facilita il trattamento tanto ai neofiti, quanto ad utenti esperti.

## CASSETTO:

- Per conservare comodamente i vari manipoli in un unico luogo



## 3 DIVERSI TIPI, IN TOTALE 6 MANIPOLI:

- Manipolo Roll per il corpo
- Manipolo Multipolare per il corpo (n.2) e il viso (n.1)
- Manipolo Termale per il viso (n.2)



# Manipoli

## VISO

MANIPOLO  
TERMALE



grande

piccolo

MANIPOLO  
MULTIPOLARE



piccolo

## CORPO

MANIPOLO  
MULTIPOLARE



grande



medio

MANIPOLO  
ROLL



# Manipoli corpo

## MANIPOLO ROLL

### Caratteristiche e vantaggi

1 Per il rimodellamento del contorno del corpo, e il miglioramento della cellulite.

2 Il manipolo Roll motorizzato vuoto-assistito bipolare permette di calibrare precisamente sia il Laser sia l'energia Radiofrequenza multipolare, nei punti dove è possibile ottenere il massimo effetto.

3 Facile da utilizzare.

4 Quattro tipi di impulsi dinamici. (M1, M2, M3, M4)



### Tecnologia

Radiofrequenza Bipolare • Aspirazione Vacuum • Trattamento con Laser LLLT.

### Area trattabile

Schiena, addome, coscia

## MANIPOLO MULTIPOLARE

### Caratteristiche e vantaggi

1 Utilizzo di 4 e più elettrodi per trasmettere corrente al tessuto cutaneo.

2 Questo manipolo multipolare vuoto-assistito per il corpo, è in grado di riscaldare contemporaneamente gli strati cutanei superficiali e profondi, trasmettendo corrente focalizzata e uniforme alla cute.

3 Facile da utilizzare.

4 Quattro tipi di impulsi dinamici. (M1, M2, M3, M4)



### Tecnologia

Radiofrequenza Multipolare • Aspirazione Vacuum • LED rosso.

### Area trattabile

Schiena, addome, coscia

# Manipoli viso

## MANIPOLO MULTIPOLARE Caratteristiche e vantaggi

- 1 Per linfo-drenaggio e rassodamento facciale.
- 2 Utilizzo di 4 elettrodi per trasmettere corrente al tessuto cutaneo. Questo manipolo multipolare vuoto-assistito per il viso, è in grado di riscaldare contemporaneamente gli strati cutanei superficiali e profondi, trasmettendo corrente focalizzata e uniforme alla cute.
- 3 Facile da utilizzare.
- 4 Quattro tipi di impulsi dinamici. (M1, M2, M3, M4)



### Tecnologia

Radiofrequenza Multipolare • Aspirazione Vacuum • LED rosso.

### Area trattabile

Fronte, guance, linea mascellare, collo.

## MANIPOLO TERMALE Caratteristiche e vantaggi

- 1 Per il Lifting Facciale.
- 2 Conduttività dell'energia termica aumentata, che riduce i tempi di trattamento, grazie alle estremità bipolari rivestite in ceramica.
- 3 Disegno ergonomico ideato per coprire anche le aree sensibili e difficili da raggiungere come le aree periorali e periorbitali.
- 4 Disponibili 2 testine: grande e piccola.



### Tecnologia

Radiofrequenza Bipolare


### Area trattabile

Grande: collo, fronte, guancia, linea mascellare.  
Piccola: periorbitale, periorale.



# Pannello di controllo

- Interfaccia intuitiva, intelligente e di facile impiego.
- Schermo touch screen a colori ad alta risoluzione con parametri preimpostati per risultati sicuri, costanti, affidabili ed efficaci.

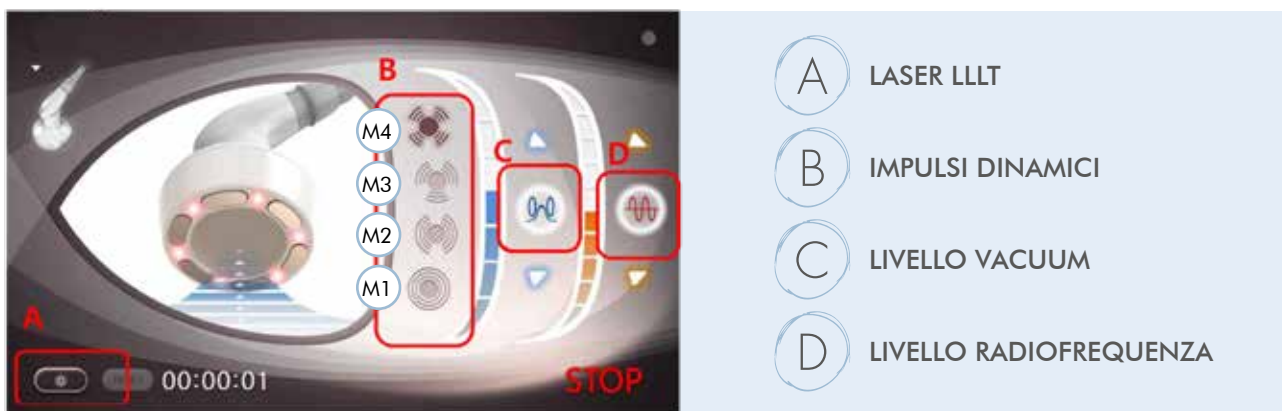

10 livelli di Radiofrequenza, 7 livelli di Aspirazione Vacuum 7, 4 Impulsi dinamici (M1, M2, M3, M4).

## Quando è indicato PharmaShape?

- Ricompattamento cutaneo • Miglioramento della cellulite • Riduzione dei pannicoli adiposi • Riduzione della circonferenza • Trattamento post liposuzione • Lifting viso e compattamento della cute

# Risultati

POTENZA COMPROVATA, RISULTATI ECCEZIONALI.

Osserva il potere trasformante dei trattamenti con **pharmaSHAPE** su un'ampia serie di corporature. Queste diverse impostazioni di trattamento, consentono di esercitare la potenza e la flessibilità necessarie per trattare quasi **ogni cliente con risultati misurabili, immediati e duraturi**.

Donna, 40 anni, dopo 10 Sedute

prima



PANCIA

dopo



FIANCHI



GAMBE



# I vantaggi

pharma**SHAPE**  
offre tutti questi vantaggi  
e tanti altri benefici.

- 1 Applicabile su un ampio gruppo di clienti per trattare varie tipologie di corporature e molteplici aree corporee, comprese quelle facciali.
- 2 Versatilità nel trattamento di diverse aree adipose ostinate, e/o cute flaccida.
- 3 Trattamenti semplici, veloci e comodi, alto livello di soddisfazione del cliente.
- 4 Non invasivo, non chirurgico, non richiede anestesia. Trattamento praticamente indolore.
- 5 Aiuta a ridurre il gonfiore postoperatorio, migliorando la circolazione sanguigna nell'area trattata.
- 6 Facile da utilizzare.



# I protocolli

## PROTOCOLLO DI UTILIZZO

- **Tempistiche:** il tempo medio richiesto per un trattamento con **pharmaSHAPE**, è di circa 30 minuti per area (viso e corpo).
- **Esperienza:** la maggior parte dei clienti si rilassa comodamente, durante l'esecuzione del trattamento.

---

## REGIME

I trattamenti sono in genere programmati secondo lo schema di 2 sessioni a settimana. La maggior parte dei clienti sosterrà 8-10 trattamenti per ottenere il risultato desiderato.

**Facile da utilizzare.**







pharma  
SHAPE  
SPECIFICHE TECNICHE

**Funzioni:**

Radiofrequenza multipolare  
Vacuum  
Laser bassa potenza  
LED rosso

**Alimentazione:**

CA 100 ~ 120 V / 220 ~ 240 V - 50/60 Hz

**Display:**

10.2" Digital touch screen

**Peso e dimensioni (WxDxH):**

413 x 572 x 1.250 (mm) / 60 kg

**Lunghezza onda emissione laser  
bassa potenza:**

760 nm

**Classe laser:**

3 R

**Frequenza segnale  
radiodifrequenza bipolare:**

1,5 Mhz

**Valore aspirazione ritmata:**

Minore di 80 kPa (0,8 bar)

**Radiofrequenza resistiva**

Conforme scheda n° 13B DM ottobre 2015, n° 206

**Vacuum**

Conforme scheda n° 14 DM ottobre 2015, n° 206

**Soft Laser**

Conforme scheda n° 21A DM ottobre 2015, n° 206



MAC01P50/FARM



B A L D A N  
G R O U P

[www.baldangroup.com](http://www.baldangroup.com)